

MUNDDUSCHE



220/ 240V 50Hz 18W

BEDIENUNGSANLEITUNG

- **Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben.**
- **Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer darf nicht durch Kinder erfolgen, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen überwacht.**
- **Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter acht Jahren.**
- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben.**



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

1. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung des Gerätes mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.
2. Dieses Gerät nur für die private Nutzung in Innenbereichen bestimmt.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur zu dem Zweck, für den es bestimmt ist und der in dieser Anleitung beschrieben wird.
4. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es auf einem sicheren Untergrund steht.
5. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
6. Das Gerät muss so installiert werden, dass es nicht in Wasser oder auf den Boden fallen kann. Der Netzstecker muss immer zugänglich sein.
7. Berühren oder ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen.
8. Ziehen Sie niemals den Netzstecker, indem Sie am Gerät ziehen. Stellen Sie das Gerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder Dusche fallen kann. Dies gilt auch für das Verstauen des Geräts.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden. Verwenden Sie es weder im Schlaf noch beim Dösen.
10. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Heben Sie ein Gerät, das in eine Flüssigkeit gefallen ist, erst dann auf, wenn Sie den Netzstecker gezogen haben.
12. Um Verletzungen zu vermeiden sollten Sie den Strahl nicht unter die Zunge, in die Ohren, die Nase, die Augen oder sonstige empfindlichen Bereiche richten.
13. Prüfen Sie vor der ersten und jeder weiteren Verwendung des Geräts, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist.
14. Verwenden Sie nur das Zubehör, das im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
15. Um Verletzungen zu vermeiden sollten Sie den Behälter nicht mit heißem oder kochendem Wasser füllen. Legen Sie keine Gegenstände in den Behälter.
16. Befüllen Sie den Behälter nur mit Wasser oder Mund- und Zahnpflegelösungen.
17. Lassen Sie das Anschlusskabel nicht herunterhängen oder heiße Oberflächen berühren.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten oder Räumen, in denen Aerosol- oder Sauerstoffsprays verwendet wurden.
19. Das Gerät muss vom Netz getrennt werden:
  - wenn Fehlfunktionen im Betrieb auftreten,
  - wenn das Anschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind,
  - vor jeder Reinigung oder Pflege,
  - vor der Montage oder Demontage,
  - wenn es nicht verwendet wird,
  - nach jeder Verwendung.
20. Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu ändern oder zu reparieren. Wenden Sie sich dazu an einen zugelassenen Kundendienst.

### **Hygienewarnungen**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie ein Piercing tragen. Nehmen Sie es vor der Verwendung ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei unverheilten Verletzungen an der Zunge, den Lippen oder im Mund.
- In den folgenden Fällen sollten Sie den Rat Ihres Zahnarztes einholen, ehe Sie das Gerät benutzen:
  - wenn Sie Medikamente einnehmen oder eine Mund- und Zahnbehandlung vornehmen lassen,

- wenn Sie innerhalb der letzten 2 Monate eine umfangreiche Zahnbehandlung, Mund- und Zahnbehandlung oder Zahnfleischbehandlung haben vornehmen lassen,
- wenn Sie Zahnprobleme oder Probleme mit der Zahnpflege (Zahnplomben, Kronen usw.) haben,
- wenn Ihr Zahnfleisch nach der Verwendung des Geräts stark blutet oder die Blutung anhält,
- bei Gesundheitsproblemen,
- wenn Sie einen Herzschrittmacher oder sonstiges Implantat tragen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Düsen
2. Behälter
3. Ein-/Ausmacher
4. Drehknopf zur Einstellung des Wasserdrucks
5. Deckel/Staufach für die Düsen
6. 360°-Düse
7. Taster zum Auswerfen der Düse
8. Pausetaster

Behältervolumen: 600 ml


## Zubehör

				
<b>Einfache Hochdruckdüse (3x)*</b>	<b>Parodontose-Düse (1x)</b>	<b>Orthodontische Düse (1x)</b>	<b>Zahnsteindüse (1x)</b>	<b>Zungenreinigungsdüse (1x)</b>

\* Einfache Hochdruckdüsen: 3 Ringfarben für die hygienebedingte Zuordnung zu einem Benutzer.

## VERWENDUNG

1. Schritt	2. Schritt
<b>Befüllung des Behälters</b>	<b>Einsetzen und Herausnehmen der Düsen</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie den Deckel und den Behälter vom Sockel.</li> <li>2. Füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser. Trocknen Sie anschließend den Behälter sorgfältig ab.</li> <li>3. Setzen Sie den Behälter mit der Skala nach vorne auf den Sockel und drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet. Setzen Sie anschließend den Deckel auf den Behälter.</li> </ol>	<p>Setzen Sie die Düse in die mittige Öffnung oben am Handstück ein. Sie muss hörbar einrasten, um fest zu sitzen.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Um die Düse vom Handstück zu lösen, müssen Sie auf den Auswurf-taster drücken und die Düse abziehen.</p>

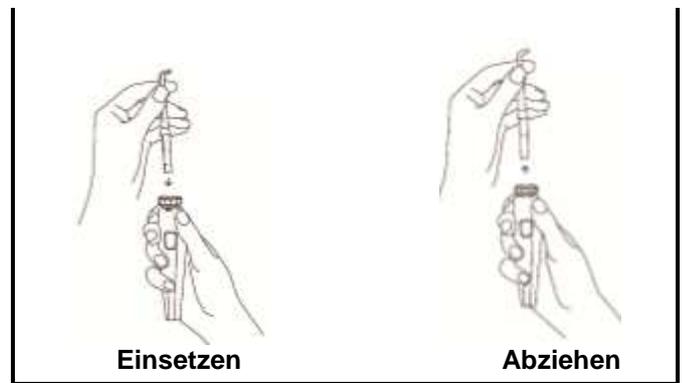

## 4. Schritt

### Einschalten

1. Schließen Sie das Anschlusskabel an einer Steckdose an. Wenn die Steckdose durch einen Wandschalter ein- bzw. ausgeschaltet wird, müssen Sie sicherstellen, dass sie eingeschaltet ist.
2. Neigen Sie sich über das Waschbecken und halten Sie die Düse zwischen Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch.
3. Ändern Sie die Orientierung des Wasserstrahls, indem Sie den Knopf oben am Handstück drehen (siehe Abb. unten).
4. Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf für die Druckeinstellung vor der Position 2 steht. Drücken Sie mit der freien Hand den Ein-/Ausschalter (Position I).



## 5. Schritt

### Einstellung der Druckparameter

1. Drehen Sie bei der ersten Verwendung den Drehknopf für die Wasserdruckeinstellung auf die Position 2.
2. Steigern Sie langsam den Druck bis Sie den gewünschten Druck erreichen.

Hinweis: Die Druckmodi des Wasserstrahls sind im Folgenden aufgeführt:

**Geringer Druck: Positionen 1-2-3**

**Mittlerer Druck: Positionen 4-5-6-7**


**Hoher Druck: Positionen 8-9-10**



## 6. Schritt

### Empfohlene Reinigungsmethode

1. Richten Sie den Strahl in einem Winkel von 90 Grad auf Ihr Zahnfleisch, schließen Sie die Lippen etwas, damit das Wasser in das Waschbecken ablaufen kann und nicht spritzt. Optimale Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie mit den Backenzähnen beginnen und zuletzt die Schneidezähne reinigen.
2. Reinigen Sie alle Bereiche um und zwischen den Zähnen bis alles sauber ist.
3. Sie können den Wasserstrahl jederzeit kurz unterbrechen, indem Sie den Pausetaster am Handstück betätigen und gedrückt halten. Lassen Sie den Taster los, um mit der Reinigung fortzufahren.
4. Schalten Sie nach Abschluss der Reinigung das Gerät aus, indem Sie auf den Ein-/Ausschalter drücken (Position O). Trennen Sie das Gerät vom Netz.
5. Entleeren Sie sorgfältig den Behälter, um die Vermehrung von Bakterien im Restwasser zu verhindern.

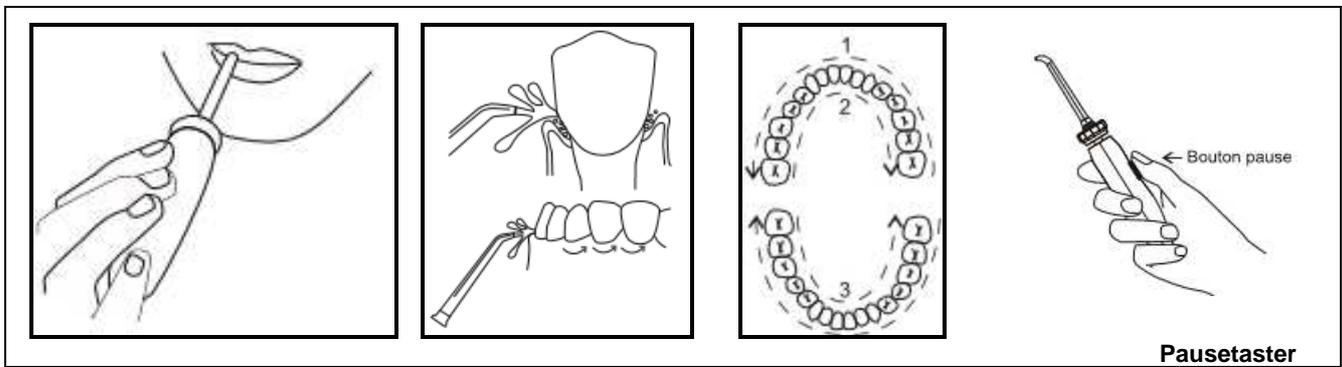

Pausetaster


## VERFAHREN FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG DER DÜSEN

Bevor Sie die Düsen verwenden, sollten Sie sich über das Waschbecken neigen und gemäß der nachfolgenden Beschreibung für die jeweilige Düse vorgehen.

### Parodontose-Düse

Die Parodontose-Düse leitet den Wasser- oder Mundpflegelösungsstrahl tief in die Zahnfleischtaschen.

1. Setzen Sie die weiche Düse in einem Winkel von 45 Grad gegen einen Zahn unter dem Zahnfleisch an.
2. Drehen Sie die Drehknopf auf die Position 2.
3. Reinigen Sie vorsichtig das Zahnfleisch, indem Sie die Düse zwischen den Zähnen einführen. Führen Sie die Düse entlang dem Zahnfleisch, bis die Reinigung abgeschlossen ist.

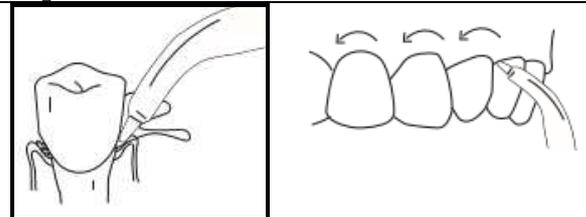

### Zungenreinigung


1. Setzen Sie den Zungenreiniger auf Ihre Zunge und schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie die Druckposition 2 und steigern Sie den Druck bis auf den gewünschten Wert.
3. Setzen Sie den Zungenreiniger vorsichtig auf die Zungenmitte und drücken Sie leicht nach vorne.



### Orthodontische Düse

Die orthodontische Düse ist nur für die Reinigung und gleichzeitige Spülung von schwer erreichbaren Bereichen bestimmt.

Verwenden Sie eine Zahnbürste um den Bereich um die Zahnspange oder Zahnprothese zu reinigen. Das Wasser läuft durch die Bürste, um Nahrungsmittelreste auszuspülen.

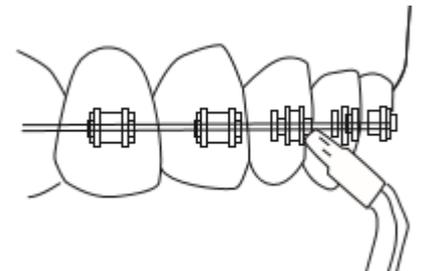

### Zahnsteindüse

Richten Sie den Strahl in einem Winkel von 90 Grad auf Ihr Zahnfleisch, schließen Sie die Lippen etwas, damit das Wasser in das Waschbecken ablaufen kann und nicht spritzt. Beginnen Sie mit den Backenzähnen und bewegen Sie die Düse langsam entlang des Zahnfleischs und der Zähne (die Borsten müssen die Zähne berühren) und verbleiben Sie kurz zwischen den Zähnen. Richten Sie den Strahl schrittweise auf die Schneidezähne zu.

Fahren Sie fort, bis alle Bereiche um und zwischen den Zähnen auf der Innen- und Außenseite sowie oben und unten sauber sind.



## REINIGUNG UND LAGERUNG

- Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „O“ stellen, den Drehknopf auf die Position 2 schalten und das Anschlusskabel des Geräts vom Netz trennen.
- Tauchen Sie das Gerät und das Anschlusskabel nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.



### **BEHÄLTER**

- Entleeren Sie nach der Benutzung des Behälters und spülen Sie in sorgfältig aus, wenn Sie eine Mundpflegelösung verwendet haben.
- Stellen Sie den Behälter mit der Öffnung nach unten auf eine flache und stabile Oberfläche, damit er trocknen kann.
- Geben Sie keinen Isopropylalkohol oder eine sonstige Reinigungsflüssigkeit in den Behälter, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Um die Lebensdauer der Munddusche zu verlängern und seine Verschmutzung zu verhindern sollten Sie gelegentlich den Behälter mit warmen Leitungswasser befüllen. Richten Sie den Strahl der Düse in Ihr Waschbecken. Schalten Sie das Gerät ein. Lassen Sie das Gerät so lange laufen, bis der Behälter leer ist.

### **GEHÄUSE DES GERÄTS**

- Verwenden Sie keinen Metallschwamm oder Scheuerpulver.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts ggf. mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch. Trocknen Sie das Gerät sorgfältig ab.

### **DÜSEN**

- Bevor Sie die Düse abziehen, müssen Sie das darin enthaltene Wasser ablaufen lassen, indem Sie die Düse in das Waschbecken richten.
  - Drücken Sie auf den Düsenauswurfaster. Trocknen Sie das Handstück und die Düse von außen. Lassen Sie die Teile trocknen.
- 
- Bewahren Sie das Gerät in Innenräumen an einem trockenen und sicheren Ort auf.
  - Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Regen.
  - Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.

## **PROBLEME UND LÖSUNGEN**

<b>Probleme</b>	<b>Ursachen</b>	<b>Lösungen</b>
Zahnreinigungsdüsen und Zungenreiniger: Zwischen Düse und Handstück entweicht Wasser.	Die Düse ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie die Düse ab und stecken Sie sie erneut in das Handstück.
Parodontose-Düse: Beschädigte Düsenspitze.	Die Düse ist verschlissen.	Ersetzen Sie sie durch eine neue Düse.
Ungeeigneter Druck	Der Behälter sitzt nicht richtig.	Setzen Sie den Wasserbehälter richtig ein. Drücken Sie auf den Behälter.
Das Gerät startet nicht	Der Motor schaltet sich nicht ein.	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Sollte das Speisekabel beschädigt sein, sollte es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

**Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC  
Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3  
D-40764, LANGENFELD, DEUTSCHLAND**

